


NO

Bruksanvisning

Støtte/brokkbelte

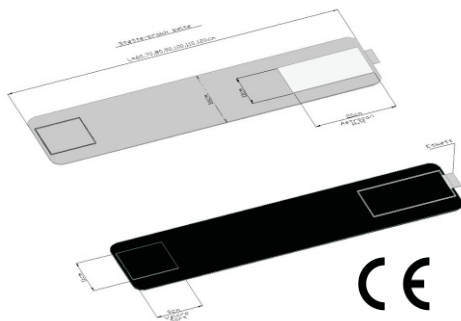

Belte skal brukes i samråd med helsepersonell.
Belte kan benyttes på begge sider.

Støtte/brokkbelte

Belte tas på over område som ønskes støtte/beskyttet og justeres med borrelås etter behov.

Ved behov kan belte tilklippes for å formtilpasse belte til kroppen.

Ved klipping av hull til stomiplate; strekk beltet under klipping, lag et snitt og form til hullets ønskede størrelse.

Belte kan benyttes under alle aktiviteter, men anbefales ikke langtidsbruk.

Vaskeanvisning:

Støtte/brokkbelte kan vaskes på 40°C og drypptørkes.

Ved bading i klor eller saltvann skal den skylles godt.


Under vask anbefales det at borrelås er montert sammen.

Produktet inneholder Latex

DK

Brugsanvisning

Støtte/Brokbælte

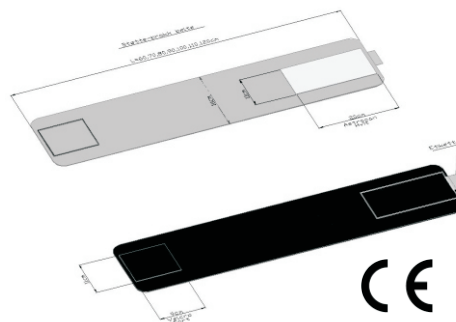

Bæltet skal bruges i samråd med læge
Bæltet kan bruges på begge sider.

Støtte/Brok bælte

Bæltet monteres over område som ønskes støttet/beskyttet og justeres med velcrolås efter behov.

Bæltets form kan efter behov ændres ved klipping

Ved klipping af hul til stomiplade; stræk bæltet under klipping, lav et snit og form hullet til ønsket størrelse.

Bæltet kan benyttes under alle aktiviteter, men langtidsbrug anbefales ikke.

Vaskeanvisning

Vaskes ved 40 grader. Undgå tørring i tørretumbler.

Bæltet skylles grundigt efter badning i klor eller saltvand


Det anbefales at velcrolås er låst under vask.

Produktet indeholder Latex

SE

Bruksanvisning

Stöd/ bräckbälte

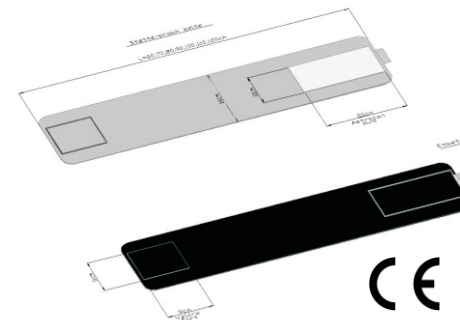

Bälte ska användas i samråd med hälsopersonal.
Bältet kan användas på båda sidorna.

Stöd/ bräckbälte

Bältet sätts över det området som man önskar att stödja/skydda. Man justerar hur hårt man vill att det ska sitta med hjälp av kardborrlåset.

Finjustering/tillklippning för individuell passform kan göras.

Vid tillpassning av stomi platta, sträck ut bältet, skär och forma önskad storlek på öppningen.

Bältet kan användas vid aktiviteter, men bör inte användas under för lång tid.

Tvättråd

Tvättas i 40 grader Celsius och ska dropp torkas. Skölj väl efter bad i klor eller saltvatten. Kardborrlås ska vara låst vid tvätt.

Produktet innehåller Latex